



tRide

Просто... лучшее
для детей и родителей



«Было бы здорово найти реабилитационную коляску, которая обладала бы важнейшими функциями и при этом была простой в обращении!»

Фрауке Бессль, Бремерфёрде




Три компонента = простое решение!



Опросы показывают: родителям нужна простота

Техническое оснащение многих реабилитационных колясок зачастую предъявляет слишком высокие требования к родителям. Поэтому они используют лишь малую часть возможных регулировок. Родителям нужна простота с сохранением важных функций.

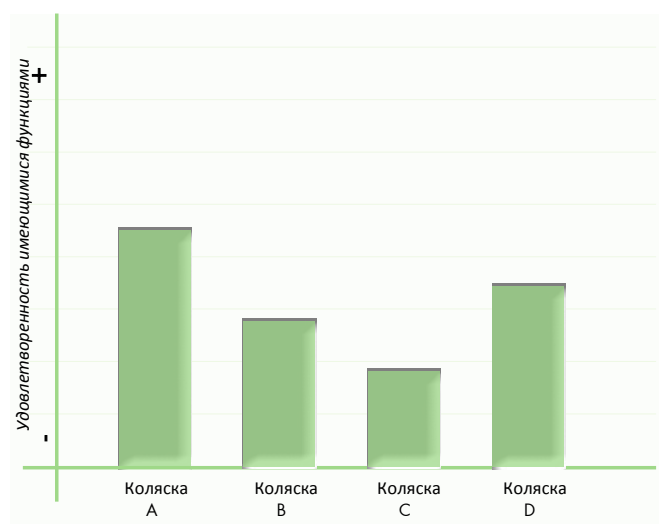

*IGAP - зарегистрированный союз
«Институт инноваций и прикладных исследований
в области здравоохранения и ухода»
Источник: февраль 2012 г.*

tRide - лучшее в простоте



Простота без стресса



- Под сиденьем коляски tRide есть просторное место для хранения – здесь можно разместить покупки, подгузники и многое другое
- Практичный механизм управления двумя функциями, который можно приводить в действие одной рукой
 - Регулировка угла наклона сиденья
 - Отсоединение сиденья от шасси
- Простота размещения в багажном отделении автомобиля – компактная конструкция, которая позволяет снизить нагрузку на спину

Удобная расслабленная поза при сидении – максимальная мобильность



- Подголовник коляски tRide подстраивается под анатомические особенности ребенка
- Чувство безопасности и защищенности благодаря наличию подлокотников
- Мягкий, «дышащий» материал обивки сиденья создает ощущение уюта
- Конструкция помогает ребенку самостоятельно вылезать из коляски и возвращаться обратно

Мобильность



Продуманная функциональность – реабилитационная коляска tRide

Обивка сиденья

Высококачественная износостойкая ткань, которую можно стирать при температуре до 40 °С

Опора для стоп

Регулировка угла наклона и высоты, возможность складывания и использования с ремешком для фиксации ног

Глубина и ширина сиденья

4 звездообразные рукоятки под сиденьем позволяют выполнять регулировки без каких-либо инструментов – даже если ребенок находится в коляске

Корзина или полка для хранения

Просторное место для хранения необходимых вещей, выдерживает нагрузку до 5 кг

Подголовник

Регулировка положения в трех плоскостях для оптимальной адаптации и поддержки

Центральный рычаг управления

Специальный механизм позволяет изменять угол наклона сиденья или отсоединять сиденье от шасси одной рукой

Угол спинки


Простой и надежный механизм регулировки с помощью центрального фиксирующего рычага

Отсоединение сиденья от шасси

Быстро – с помощью одного рычага

«Механизмы реабилитационной коляски не должны быть сложными в управлении или раздражающими. Такой коляской было бы удобно пользоваться и дома».

IGAP – зарегистрированный союз «Институт инноваций и прикладных исследований в области здравоохранения и ухода»

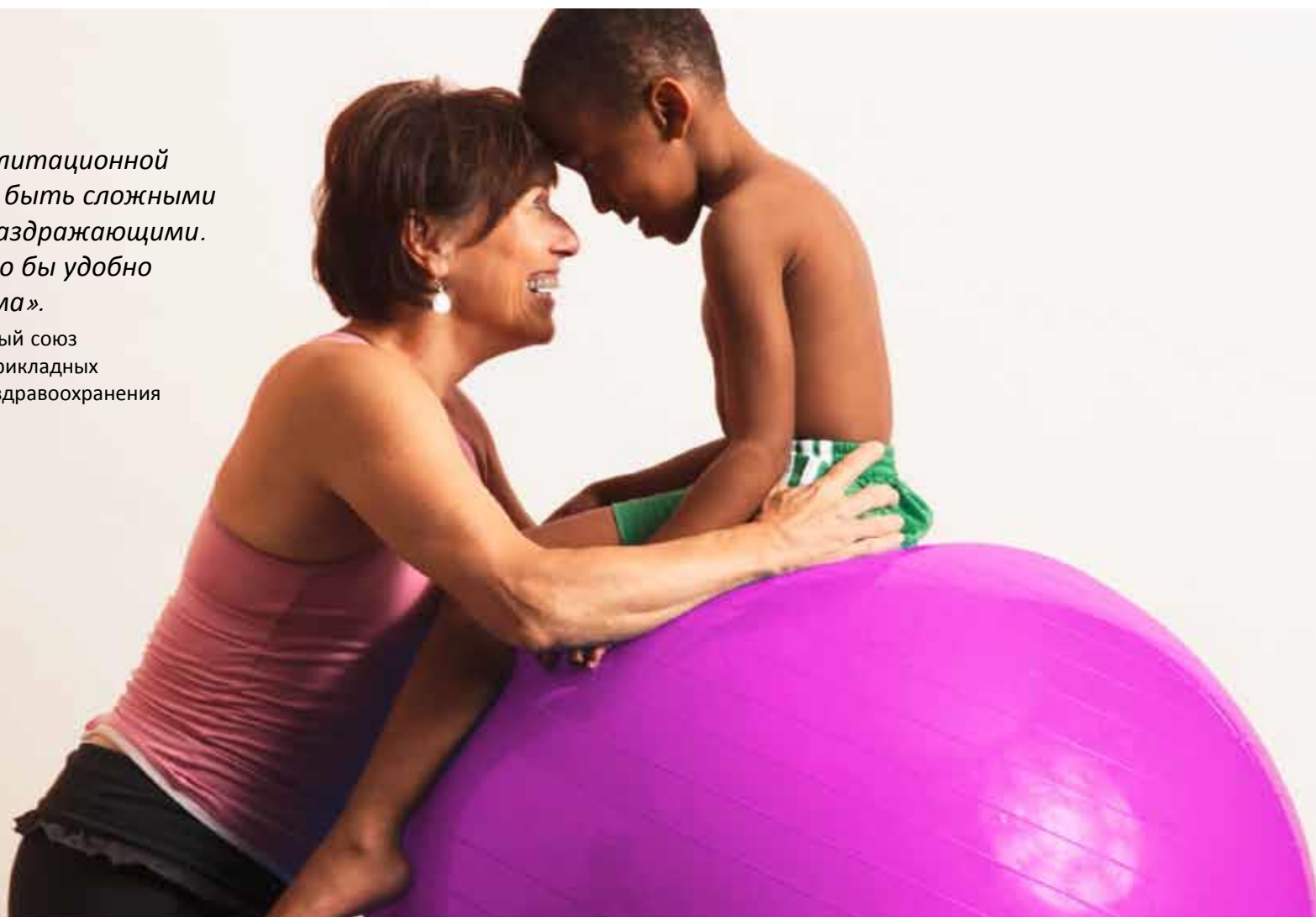


Простота и спокойствие адаптации в терапевтических целях для всех

- Широкие возможности регулировки для достижения оптимального положения сиденья и терапевтического эффекта
- Богатый выбор аксессуаров позволяет размещать ребенка с учетом его индивидуальных особенностей
- Больше внимания ребенку, а не коляске: оптимальная интеграция

Реабилитационная коляска tRide



Регулируемый в трех плоскостях подголовник позволяет ребенку удобно сидеть в расслабленном состоянии. Он поддерживает анатомически правильное положение головы и позу при сидении.

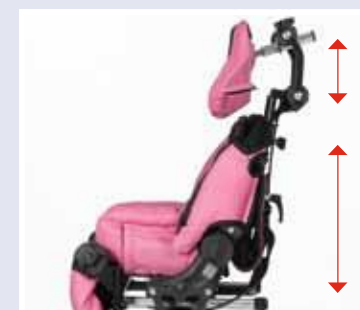

Небольшая длина спинки и отдельный подголовник обеспечивают лучшую свободу движений в области от поясницы до верхних конечностей. Благодаря этому ребенок находится в устойчивом положении и лучше воспринимает окружающий мир.



Функциональную опору для ног можно адаптировать к индивидуальным особенностям ребенка. Это помогает создавать оптимальные условия для того, чтобы ребенок мог вылезать из коляски и возвращаться обратно, поддерживая свои мышцы в тонусе, а также снижает нагрузку на спину при перемещении сиденья.



Тщательно продуманная эргономика обеспечивает комфорт по мере роста ребенка и даже при необходимости продолжительного ухода гарантирует отсутствие неудобств.



Положение для сидения или отдыха устанавливается быстро и просто. Поэтому коляска tRide – это оперативный и несложный способ снижения нагрузки на позвоночник ребенка.



Размеры и вес

| | tRide, сиденье 1 | tRide, сиденье 2 |
|--|------------------|------------------|
| Глубина сиденья | 17-28 см | 24-35 см |
| Ширина сиденья | 20-30 см | 26-35 см |
| Высота спинки* | 26-42 см | 32-52 см |
| Длина голени | 17-30 см | 25-36 см |
| Угол наклона бедер | От 90° до 140° | От 90° до 140° |
| Угол сгибания колен | От 90° до 180° | От 90° до 180° |
| Угол наклона стоп | От 78° до 100° | От 78° до 100° |
| Поворот сиденья | 10-14 см | 12-18 см |
| Регулировка высоты боковых поддержек | 21 x 10 см | 29 x 12 см |
| Размер боковых поддержек (Ш x В) | 29 x 18 см | 33 x 21 см |
| Размер опоры для стоп (Ш x Г) | 85 x 41 x 57 см | 98 x 46 x 46 см |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В) | 63 x 36 x 38 см | 76 x 46 x 50 см |
| Размеры в сложенном сост. без опоры для стоп (Д x Ш x В) | 8 кг | 10,8 кг |
| Вес сиденья* | 35 кг | 40 кг |

* без подголовника

Размеры и вес

| | tRide, шасси 1 | tRide, шасси 2 |
|---|------------------|-------------------|
| Угол наклона сиденья | От -10° до +35° | От -10° до +35° |
| Высота сиденья | 46 см | 47 см |
| Высота рукоятки для толкания | 76-117 см | 81-120 см |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В) | 75 x 60 x 77 см | 81 x 67 x 79 см |
| Размеры в сложенном состоянии (Д x Ш x В) | 79 x 60 x 38 см | 83 x 67 x 38 см |
| Размер поворотных колес (передние) | 19 см / 7,5" | 19 см / 7,5" |
| Размер колес (задние) | 25 см / 10" | 25 см / 10" |
| Вес (без сиденья) | 8,2 кг | 9 кг |
| Макс. грузоподъемность (вкл. сиденье) | 45 кг | 50 кг |
| Габаритные размеры коляски tRide | 90 x 60 x 101 см | 110 x 67 x 101 см |
| Размеры коляски tRide в сложенном состоянии | 81 x 60 x 63 см | 79 x 64 x 72 см |



Titan Deutschland GmbH
An der Leimenkaut 31
61352 Bad Homburg, Germany
(06172) 684 441 / 684 439

Дилер в России:
ООО НПИП «МИР ТИТАНА»
info@mirtitana.com
www.aktiko.ru
(007) 495 937 3160